

SIMPLIFIEZ VOTRE PROCESSUS D'ENROBAGE

SimpliUV associe une technologie avancée de polymérisation UV à une interface utilisateur intuitive pour offrir des résultats rapides et reproductibles. Associé aux moules **UVKup®** et à la résine **UVKwick®**, il simplifie l'ensemble de votre processus d'enrobage.



RAPIDITÉ

Cycles de polymérisation à partir de 2 minutes



SIMPLICITÉ


Sélectionnez votre programme et appuyez sur Démarrer



RÉPÉTABLE


Des programmes garantissent une qualité d'enrobage constante, cycle après cycle.

1 Verser

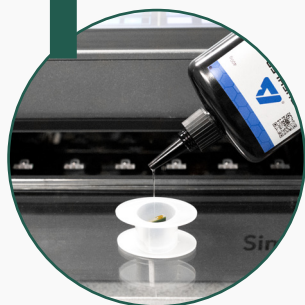


Placez votre échantillon dans un moule **UVKup®**, puis remplissez-le avec la résine **UVKwick®**.

2 Programmer

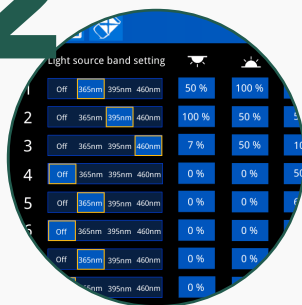

Sélectionnez un programme adapté pour polymériser la résine.


3 Polymériser

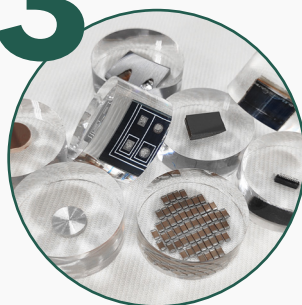

Lancez le cycle de polymérisation et obtenez des échantillons prêts pour l'étape suivante de votre préparation.

Préparation avec UVKwick®

- ✓ Grande transparence et très fluide
- ✓ Dureté > 80 Shore D pour un excellent maintien
- ✓ Formulé pour offrir un retrait optimisé lors de la polymérisation

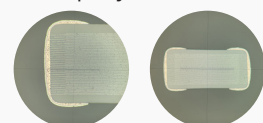

Scannez pour en savoir plus sur **SimpliUV**



Contrôle programmable

Réglez les paramètres selon vos besoins grâce à 9 programmes personnalisables.



Grande capacité de traitement

Compatible avec plusieurs tailles d'échantillons et permettant la polymérisation simultanée de jusqu'à 20 échantillons enrobés*.

* Selon la taille des moules et des échantillons.



Éclairage homogène

La technologie à matrice de LED garantit une polymérisation uniforme, quelle que soit la position des échantillons dans le tiroir.

Informations de commande

- 201800UV** Système SimpliUV
- 201810040** Résine UVKwick 400 g
- 2018100400** Résine UVKwick 4 kg
- 201820025** Moule UVKup Ø 25 mm

Autres dimensions de moules disponibles : mm : 25, 30, 40, 50 | Pouces : 1, 1,25, 1,5, 2

Répétabilité des résultats

Des enrobages transparents et de grande qualité offrant une excellente conservation des arêtes.



Consommables optimisés



UVKwick®
Résine d'enrobage par polymérisation UV.



UVKup®
Moules durables et réutilisables.

Conçu pour la performance



Cycles de polymérisation à partir de 2 minutes



Résine monocomposant
Aucun mélange. Aucun désordre.



Simplicité automatisée
Le tiroir automatisé réduit les risques de débordement lors du chargement des enrobages.



Polyvalence d'application
Les programmes multi-étapes répondent aux besoins d'une grande variété d'applications.

Caractéristiques techniques

Longueurs d'onde	365 nm, 395 nm, 460 nm	Alimentation	100-240 V CA, 50/60 Hz
Durée de vie des LED	>10 000 heures	Dimensions	450 x 330 x 250 mm (L x P x H) (17,7 po. L x 13 po. P x 9,8 po. H)
Programmes	Jusqu'à 9 programmes personnalisés	Poids	28,5 kg (62,8 lb)
Capacité de la chambre	Jusqu'à 20 échantillons enrobés*	* Selon la taille des moules et des échantillons.	



Scannez pour en savoir plus sur **SimpliUV**